



AGELESS  
WONDER™



FACIAL MUSCLE  
STIMULATION SYSTEM



面部肌肉

刺激系統

使用者指南

## 感謝您購買本產品

我們代表 Thane Direct 整個團隊，感謝您最近購買 AGELESS WONDER™。

Ageless Wonder™ 提供溫和的微電流脈衝來減少皺紋，修復和調面部肌肉，形成一個更年輕的外觀。

- 改善面部表情
- 修復皮膚
- 減少浮腫
- 甚至改善膚色

享受您的 AGELESS WONDER™，歡迎再次光臨，

由衷感謝！

## 目錄

### 重要事項！

使用 AGELESS WONDER™前請閱讀完整的說明書。

它可以使您更好的瞭解設備的工作方式，讓您將能夠享受最好的果效。

### 警告

### 提醒

### 簡介

### 組成

### 操作

### 清潔和護理

### 常見問題

### 故障排除

## 警告

AGELESS WONDER™使用非常安全簡單。我們不承擔任何因誤用所造成損害的責任。使用該設備前，請閱讀完整說明書。

AGELESS WONDER™ 旨在指導手冊所表明的個人美容目的，是通過刺激面部肌肉用於面部組織的化妝品。所有其他用途均應視為不當用途。電刺激的長期影響尚不清楚。

- 僅限於在正常、健康和清潔的皮膚上使用AGELESS WONDER™。
- 不適用刺激：
  - 腫脹、感染或發炎的皮膚或皮疹部位上方。
  - 接近腫瘤或其他皮膚損傷或開放性傷口上方。
  - 在經歷急性創傷或最近手術後。
  - 繞著頭部。
  - 胸部上方，隨著電流的引入心臟可能會導致心律紊亂，這可能有害健康。
- 下列情況嚴禁使用 AGELESS WONDER™
  - 在駕駛、操作機械或在可能危及用戶或其他人的非自願的肌肉收縮鍛煉期間，
  - 在睡覺的時候，
  - 浴缸內或淋浴時。
- 嚴禁將 AGELESS WONDER™ 設備或應用棒浸泡在水或其他液體中。
- 將 AGELESS WONDER™ 置於兒童接觸不到的地方。

## 提醒

- 如果您可能發生大出血，請勿使用本產品。
- 如果您臉上進行了注射（如肉毒桿菌或面部皮膚填充劑）或附近部位有外科植入物，請勿在您臉上使用本產品。
- 請勿在那些缺乏正常感覺的皮膚部位上方使用本產品。
- 有心臟病的人在使用產品之前應該諮詢醫生。
- 老年人應在有人監督和低強度的情況下使用本設備。
- 如果您感覺到任何不良反應，如皮膚刺激、過敏、燒傷或任何類型的肌肉刺激或不適，應立即停止使用此設備。
- 孕婦在使用本產品前應先諮詢醫生。
- 僅可根據本手冊中的插圖使用應用棒。
- 用戶應該以坐姿開始開始所有鍛煉課程。
- 如果您存在以下狀況，使用該設備前請諮詢醫生：
  - 心臟疾病或心臟衰弱（無論您是否有心臟起搏器或其它植入裝置）
  - 癲癇
  - 多發性硬化症
  - 活性期靜脈炎（靜脈炎症）
  - 最近形成的疤痕組織或手術
  - 晚期靜脈曲張

## 簡介

AGELESS WONDER™ 是電池供電的可攜式電子設備，用於改善面部肌肉，收緊和緊緻面部皮膚。它採用專門設計的雙極性低電壓微電流脈衝刺激您的面部肌肉收縮。

面部是最難訓練和鍛煉的肌肉部位之一。隨著AGELESS WONDER™的面世，您能收縮臉上的肌肉纖維，安全、有效地鍛煉您的面部肌肉，從而讓它們變得更緊致，讓您的臉看起來更加飽滿。

AGELESS WONDER™ 產生小小的溫和電脈衝通過應用棒傳遞到您的皮膚。這些電脈衝刺激您的潛在運動神經，導致肌肉收縮。AGELESS WONDER™發送信號到您的肌肉使其收縮，然後放鬆。這些脈衝旨在類比自然神經信號，並獲得有效、愉快、連續的收縮，它能刺激這些不可能鍛煉的面部肌肉，而且使用非常簡便！

臨床研究試驗已經對 AGELESS WONDER™設備的有效性進行了測試。AGELESS WONDER™ 設備的性能增加到了 6 個預程式設計模式，這些模式均使用方便，並具有最明顯的果效。該程式是專為 5 個不同的面部區域而設計的。


## 組成



- Ageless Wonder™ 控制台
- 耳機
- 帶線的應用棒
- 應用棒手柄（可選配件）
- 帶線的單應用棒（可選配件）
- 導電爽膚凝膠
- 使用者指南
- 2 個 AAA 電池

## 操作

### LCD 顯示器

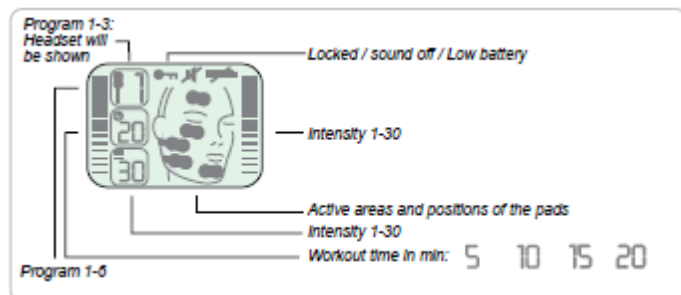

程式 1-3:

耳機顯示

程式 1-6

鎖定/關閉聲音/電池電量低


強度 1-30

導電墊的活動區域和位置

強度 1-30

鍛煉時間（分鐘）：

### 如何操作控制

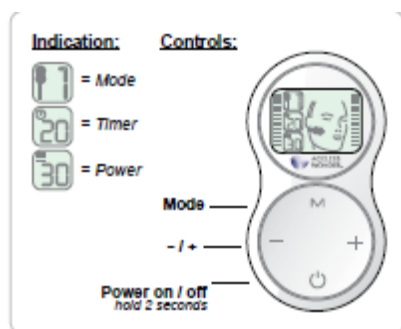

說明：

控制：

模式

計時器

功率



## 模式

- / +

電源開/關

保持 2 秒

——**鍵鎖定切換開/關**：同時按下並按住**模式 M** 按鈕以及“+”鍵，與此同時本裝置的應用棒運行，您處於強度模式。LCD 會顯示鍵鎖定圖示。

——**靜音切換開/關**：同時按下並按住**模式 M** 按鈕以及“+”鍵，堅持 2 秒。LCD 會顯示靜音圖示。

## 電池低電量指示器（AGELESS WONDER™需要使用2節AAA電池）

1、通過滑動蓋板打開電池盒。拉出託盤並將2個AAA電池置於適當位置。推入託盤並將電池盒蓋板放回原位。



2、使用導電爽膚凝膠提供一個小凝膠彈片並將其置於各個黑色導電面。塗上凝膠，使所有導電面均覆蓋上一層凝膠。



3、應用棒非常靈活，可以跟隨您的臉部輪廓操作。戴耳機鍛煉，簡單方便。



## **Tip!**

對於程式模式1和2，正確的位置是剛好在您的臉頰骨下方，朝向您的臉後部。

Ageless Wonder™與耳機或手柄（可選配件）配合使用。我們建議使用耳機進行程式模式1-3（遵循選項）。程式模式4-6則使用手柄（可選配件）並參照選項B進行安裝。


### 選項A：耳機的使用（程式模式1-3）：

將應用棒卡在耳機的兩端。一旦應用棒牢固安裝在耳機上，便將導線插入裝置，打開裝置並選擇您的選項。



選項B：手柄使用（程式模式4-6）：

將可選的單應用棒卡入可選手柄中。一旦應用棒牢固安裝在手柄上，將導線插入裝置，打開裝置並選擇您的選項。

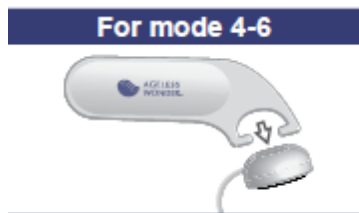

### 程式模式和應用部位

沒有進行刺激之前AGELESS WONDER™對面部肌肉不起作用。AGELESS WONDER™真正起效且成效顯著。其果效的連貫性是關鍵因素。堅持連續四周每天使用AGELESS WONDER™15分鐘。此刺激模式使用耳機。

模式1——臉頰——飽滿

- 將耳機與應用棒保持水準放置，顴骨下方，耳部前方大約1-2釐米。

本程式將用實際行動帶給您一個更飽滿的外形並帶給您的皮膚更加緊致光滑的外觀和感覺。



### 模式2——臉頰——緊致和光潔

- 將耳機與應用棒保持水準放置，顴骨下方，耳部前方大約1-2釐米。

本程式會帶給您更緊致、更柔和的臉型外形，給您更平滑的肌膚外觀和感覺。



### 模式3——臉頰下方

- 將耳機與應用棒保持水準放置，顴骨下方，耳部前方大約2-3釐米。

選擇這種模式，以刺激從嘴角到上下顎的臉頰較低部位。



本刺激模式使用手持應用棒。使用應用棒連接到電線，並將其插入到設備中。請注意，如果沒有耳機，只有帶連接線的應用棒才能起作用。我們建議用手柄（可選附件）卡住可選的單應用棒的後部。

### 模式4——前額

- 選擇此模式，用來刺激額顳部位。



#### 模式 5 ——下巴，下頷線

選擇這種模式，用來刺激下巴和下頷線。



#### 模式 6 -眼睛下方部位


選擇此模式，用來刺激您眼睛下方的部位。



## 強度



具有30個強度級的功率

在電源模式  強度等級時按下 **+/-** 按鈕。1 級是您能感覺到的首個強度。在模式設置中選擇您的程式後，預設值是 0。增加強度後，您會注意到肌肉收縮之前會有一種刺痛感。一旦肌肉收縮，您會感到愉快和放鬆。根據您的舒適度調整強度。

強度有30個級別。每按一次 **+/-** 按鈕，您增加/減少一個級別的強度。

按住按鈕1.5秒進入快速滾動模式。


### **Tip!**

*為了達到最佳果效，我們建議設置在一個較低級別強度。找到正確的級別，增加強度達到可耐最大級別強度，並降低1-3個級別直到您感到舒適並仍然產生強烈的肌肉收縮。*

## 計時器



默認時間為5分鐘。按一次 **+/-** 按鈕可以增加或減少時間增量。最大時間為20分鐘。

- 1、若要關閉設備，按下並按住 **ON/OFF**  按鈕2秒。
- 2、打開/關聲音，同時按住**模式M**和“-” 按鈕2秒。

該顯示器將顯示“聲音關閉”（sound off）圖示。

## 自動功能

如果不使用，該設備將在30秒後自動關閉。**AGELESS WONDER™**設備帶有自動計時器。選定計時器設置後它將自動關閉。如果在使用過程中改變程式模式，計時器將繼續從原來的剩餘時間倒計時，不會重新啟動計時器。

## 如果您感覺不到任何肌肉收縮的處理方法

如果沒有感覺到肌肉收縮，移動應用棒慢慢地圍繞您打算鍛煉的目標部位。確保應用棒的黑色導電表面是濕潤的，以便觸摸。通過按壓“+” 按鈕，逐步增加脈衝強度，直到產生肌肉收縮。

**AGELESS WONDER™**是光潔皮膚的好方法，讓您的臉飽滿緊致。它可能需要用幾分

鐘時間來正確定位應用棒，並適用於為您帶來最佳果效的理想壓力。

## **Tip!**

如果應用棒的黑色導電表面沒有足夠濕潤或沒有充分接觸皮膚，您可能會產生一個不適的刺痛感。

## 清潔和護理

請勿將設備、應用棒或耳機浸泡在水中！

- 用一塊帶洗滌劑的略濕海綿清潔配件，並用布擦拭乾淨。
- 不時用濕布和肥皂水清潔導電表面。
- 不要在導電部位上用力擦拭。



## 常見問題

問：AGELESS WONDER™ 的工作原理是什麼？

答：AGELESS WONDER™ 旨在模擬從您的大腦發送到面部肌肉的消息。這些資訊導致肌肉收縮和放鬆。

問：肌肉會變得過度緊張嗎？

答：不會。其原理同樣是用於任何肌肉的常規鍛煉——與適當的休息時間多運動一樣，肌肉會變得更強健更光澤。

問：使用AGELESS WONDER™有年齡限制嗎？

答：AGELESS WONDER™適合成人使用，老年人只有在監督下和低強度下方可使用本設備。本設備不得用於嬰兒、幼兒或兒童。

問：我會產生不適感嗎？

答：只要黑色導電表面覆蓋了一層薄薄的凝膠並牢固地緊貼皮膚，您不會感到任何不適。在低強度時，您會感覺到輕微的刺痛感，但隨著強度的提高，您只會感

覺到愉悅的收縮。當然，如果您覺得在某個特定部位持續產生刺激或不適感，則在您的臉上不同部位移動應用棒。

問：每一塊肌肉的強度設置是否相同？


答：每一個肌肉都會有不同的反應，所以強度會有所不同。在周圍移動應用棒找到正確的觸發點，帶給您最大的收縮。

問：使用 AGELESS WONDER™ 是否有任何禁忌？

答：使用前請閱讀所有的警告及提醒內容。

### 故障排除指南

故障	可能原因	解決方案
LCD指示燈全部不亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>——未安裝電池</li> <li>——電池安裝不正確</li> <li>或電池託盤未鎖定到位</li> <li>——電池沒電了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>——安裝電池</li> <li>——檢查“+”、“-”極性</li> <li>——取出電池板並重新插入，直到它鎖定到位。確認發出嗶嗶聲。</li> <li>——更換電池</li> </ul>
LCD指示燈亮了，但毫無知覺	<ul style="list-style-type: none"> <li>——無皮膚接觸</li> <li>——未正確插入應用棒</li> <li>——應用棒未正確連接到耳機</li> <li>——微處理器凍結</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>——檢查導電表面是否覆蓋有一層凝膠</li> <li>——檢查應用棒插頭是否牢固地連接到控制裝置</li> <li>——首先用手持應用棒檢查操作，以便逐個檢查故障。如果手持操作</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>——電池電量低</li> </ul>	<p>起作用，將應用棒連接到耳機並檢查兩個應用棒是否正確連接到耳機</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>——選擇模式，並通過按壓+按鈕增加強度</li> <li>——執行重定，取出電池為 1 分鐘的全部重定</li> <li>——更換電池</li> </ul>
LCD指示燈亮了，但不起作用。	<ul style="list-style-type: none"> <li>——強度設置成了低級別</li> <li>——導電海綿不夠濕潤</li> <li>——應用棒定位錯誤</li> <li>——導電海綿有油脂沉積</li> <li>——電池電量低</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>——選擇  模式，並通過按壓“+”按鈕增加強度</li> <li>——在導電表面上塗抹更多的凝膠</li> <li>——移動應用棒定位您的觸發點</li> <li>——清潔導電表面</li> <li>——更換電池</li> </ul>
LCD指示燈亮了，但按鍵全部都沒反應。	<ul style="list-style-type: none"> <li>——微處理器凍結</li> <li>——電池電量低</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>——執行復位，取出電池，等待 1 分鐘，以便全部重定</li> <li>——更換電池</li> </ul>

### 重要事項：電源復位

如果裝置沒有開啟，或者如果您不能切換到不同程式，微處理器可能存在“凍結”。請進行簡單的復位。取出電池，1 分鐘後將其放回原位。

